



CALF CUFF APPLICATION

Wrap the cuff around the calf and secure the Velcro to hold it in place. Make sure the wrap is snug, but not too tight.

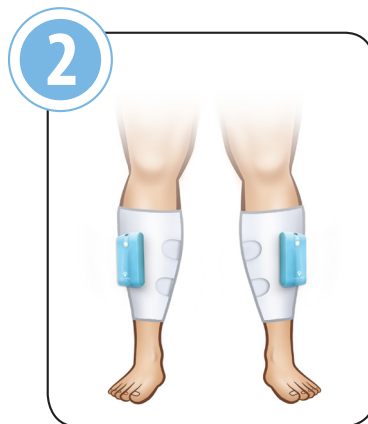


When both wraps are secured on your legs, they should look like the picture above.

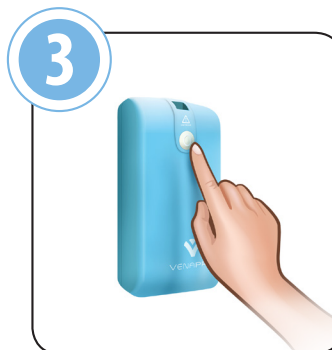

TURNING THE DEVICE ON

When the wraps are secured on your legs, PRESS and HOLD the WHITE power button for about a second until the light is illuminated on each unit.

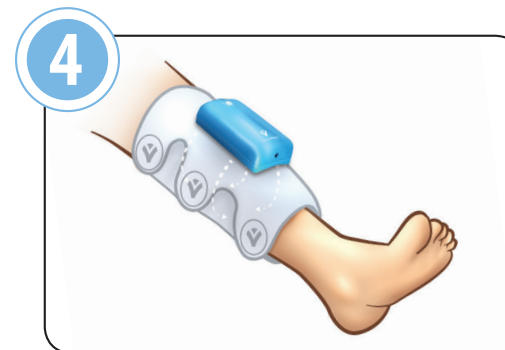

USING THE DEVICE

Don't be startled. The device will make a "humming" sound when inflating and squeezing your leg. **THIS IS NORMAL.** The wraps will inflate once a minute. IF YOU FEEL air releasing around the legs, this is normal. This is a function of the device to keep your legs cool.

PUMP ALARMS

What to do if the Pump Alarms

Don't worry, the alarms are there to insure the units are operating correctly.



BATTERY CRITICAL

If battery voltage drops below a critical level, cycling stops, audible alarm will sound, and UNIT WILL FLASH YELLOW. The Alarm will continue for 30 seconds (unless the unit is powered off) and automatically turn the unit OFF.



LOW PRESSURE

LOW PRESSURE OR LEAK

If the ALARM sounds and the BLUE LED is flashing, the pressure is too LOW. Make sure wrap is attached snugly to the leg. Turn the Unit OFF and then back ON to reset the alarm.

If the unit continues to ALARM after this step, DO NOT try to fix the device. Call Customer Service for a replacement unit at 877-475-7050.

POWER



If the power button illuminates GREEN the units are fully operational.



If the devices DO NOT turn ON, or the power button is "YELLOW" or "FLASHING YELLOW" plug in the power cord immediately to the electrical outlet.



If both units are plugged in, AND turned ON the power button will be GREEN and the batteries WILL charge at the same time.



When the unit is turned OFF and plugged in the battery is charging the POWER BUTTON FLASHES RED.




Once the battery reaches full charge the POWER BUTTON WILL BE RED and REMAIN SOLID.



PLEASE DO NOT CONTACT YOUR PHYSICIAN OR SURGICAL FACILITY FOR ANY QUESTIONS REGARDING THIS DEVICE.


CALL Customer Service: 877-475-7050

PLEASE VISIT: www.InnovaMedHealth.com and click on the PATIENT TAB for an instructional video on the use of this device.

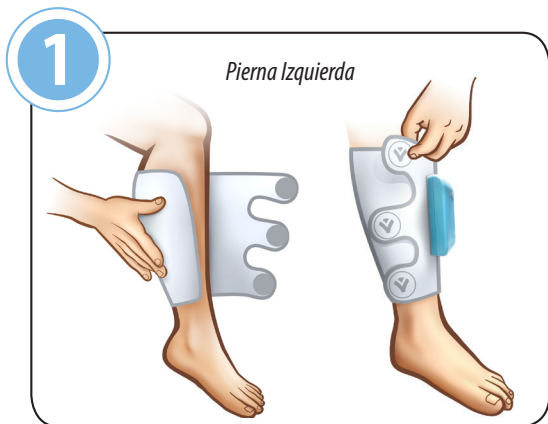


COLOCACIÓN DE LA MANGA PARA PANTORRILLAS

Envuelva la pantorrilla con la manga y cierre el velcro para mantenerla en su lugar. Asegúrese de que la manga esté bien ajustada, pero no demasiado.

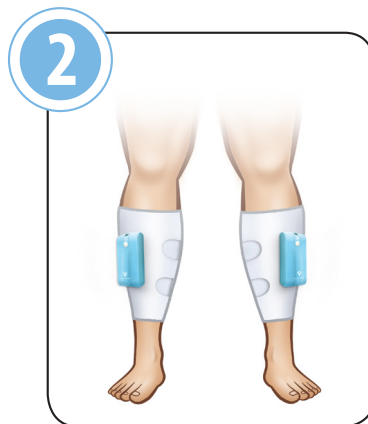


Una vez colocadas las mangas en ambas piernas, se deberán ver como en la imagen de arriba.

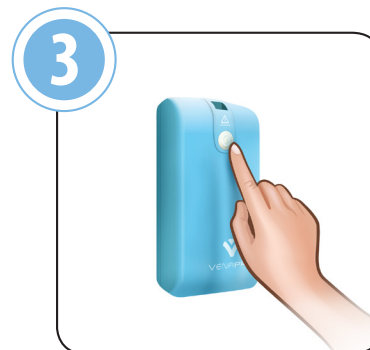

ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

Cuando tenga puestas las mangas en las piernas MANTENGA PRESIONADO el botón de encendido BLANCO durante aproximadamente un segundo hasta que se ilumine la luz de cada unidad.

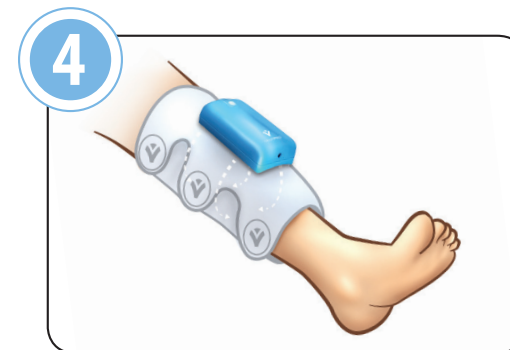

USO DEL DISPOSITIVO

No se asuste. El dispositivo hará un "zumbido" al inflarse y comprimir su pierna. **ES NORMAL.** Las mangas se inflarán cada un minuto. Si SIENTE aire alrededor de las piernas, es normal. Es una función del dispositivo para mantener sus piernas frescas.

ALARMAS DE LA BOMBA

Qué hacer si se enciende la alarma de la bomba

No se preocupe, la función de las alarmas es garantizar que las unidades funcionan correctamente.



PRESIÓN BAJA O FUGA

Si el nivel de la batería está por debajo del nivel crítico, el ciclo se detendrá, sonará una alarma y PARPADEARÁ UNA LUZ AMARILLA. La alarma seguirá sonando durante 30 segundos (a menos que se apague la unidad) y la unidad se apagará automáticamente.



LOW PRESSURE

PRESIÓN BAJA

Si suena la ALARMA y parpadea la LUZ AZUL, la presión está demasiado BAJA.

Asegúrese de que la manga esté bien ajustada a la pierna. APAGUE la unidad y vuelva a ENCENDERLA para reiniciar la alarma.

Si la alarma de la unidad sigue sonando después de esto, NO intente reparar el dispositivo. Llame a Atención al cliente al 877-475-7050 para solicitar una unidad de reemplazo. Call Customer Service for a replacement unit at 877-475-7050.

ENCENDIDO



Si el botón de encendido se ilumina de color VERDE, las unidades funcionan correctamente.



Si el dispositivo NO se enciende o el botón de encendido se pone a parpadear en color AMARILLO, enchufe el cable inmediatamente al tomacorriente.



Si ambas unidades están enchufadas Y encendidas, el botón de encendido será de color VERDE y las baterías se cargarán al mismo tiempo.



Cuando la unidad está APAGADA y enchufada, la batería se carga y el BOTÓN DE ENCENDIDO PARPADEA EN COLOR ROJO.



Una vez que la batería está completamente cargada, el BOTÓN DE ENCENDIDO SERÁ DE COLOR ROJO CONSTANTE.



SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE ESTE DISPOSITIVO, NO CONTACTE A SU MÉDICO O CENTRO QUIRÚRGICO.

LLAME a Atención al cliente: 877-475-7050

VISITE: www.InnovaMedHealth.com haga clic en la pestaña PACIENTE para ver un video instructivo sobre el uso de este dispositivo.